

Vibio Trilalarm

BE1221-P02



 Bellman & Symfon®



Functies

Sterke trillingen
Maakt zelfs diepe slapers wakker

Bluetooth®
Inclusief gemakkelijk te gebruiken app

Slimme meldingen
Waarschuwingen voor oproepen en berichten

Snooze-riem
Snooze of stop door zacht te trekken

Instellen en vergeten
Werkt zelfs zonder de telefoon

Een geweldige manier om uw dag te beginnen.

Of u nu klaar bent om in uw bed te duiken na de dagelijkse sleur of gewoon een dutje nodig hebt om op te laden, Vibio zorgt ervoor dat u op tijd opstaat. Stel het alarm in via de gebruiksvriendelijke app, beschikbaar voor zowel iOS als Android, en stop Vibio onder uw kussens of matras. Als het tijd is om uw dag te beginnen, maakt Vibio u wakker met stille maar krachtige trillingen. Vibio is de perfecte keuze voor zware slapers, koppels en mensen met gehoorverlies.

Vibio kan u zelfs op de hoogte brengen van oproepen en berichten tijdens het dutje, zodat u niets belangrijks mist. Nog niet klaar om uit bed te komen? Trek aan de snooze-riem onder het kussen voor nog een paar minuten in bed.



MD

Medisch apparaat met CE-markering volgens EU MDR 2017/745



Technische specificaties



Afmetingen en gewicht

Trilschijf

Ø: 94 × 94 mm, 3,7 × 3,7"

Hoogte: 27 mm, 1,1"

Gewicht: 153 g, 5,4 oz.




Snooze-riem

Lengte: 120 mm, 4,7"

Knoppen en indicatoren

USB Micro-B-poort

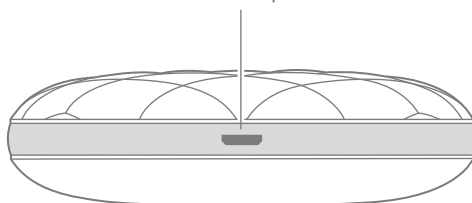


Snooze-riem

Trek × 1 keer om te sluimeren

Trek × 2 keer om te stoppen



Aan/Uit-knop

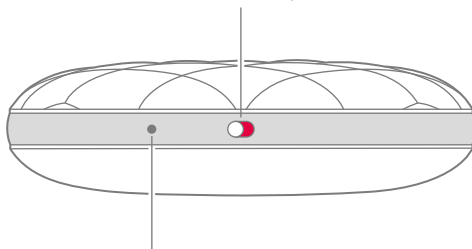

Reset-opening

Compatibiliteit

- iOS15/Android 8 en hoger
- iPhone 6S en hoger
- Moderne Android-telefoons

Frequentie en dekking

- Bluetooth® frequentie: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetooth® dekking: Tot 30 m, 33 yd, vrij veld

Milieuvereisten

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur: 0 ° - 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

Goedkeuringen

MD Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Stroom en batterij

- Batterijvermogen: 1 × 3,7 V AA lithium-ion
- Stroomverbruik:
Actief met sterke trilling: < 1000 mA
Inactief: < 100 µA
- Gebruiksduur: Tot 10 dagen per laadbeurt
- Oplaadtijd: Tot 1,5 uur @ 500mA
- Laadstroom: Tot 500 mA, 5V DC

Connectiviteit

- Bluetooth® 5

Kabels en aansluitingen

- Kabellengte: 1 m, 39"
- Contacten: USB type A naar USB Micro-B

Onderhoud en reiniging

- Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek.
- Gebruik geen glasreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.

In de doos

- Vibio Trilalarm
- Laadkabel
- Handleiding (Smartphone niet inbegrepen)



© 2025 and TM Bellman & Symfon

Bellman en Bellman & Symfon zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB, alle rechten voorbehouden. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1221-P02_033DSH1.0-NL

bellman.com

Coussin Vibrant Vibio

BE1221-P02



 Bellman & Symfon®



Caractéristiques

Vibrations puissantes

Réveille même les gros dormeurs

Bluetooth®

Application facile à utiliser est incluse

Sangle de sieste

Répéter ou arrêter avec une traction

Notifications intelligentes

Alertes pour les appels et les messages

Régler et oublier

Fonctionne même sans le téléphone

Une excellente façon de commencer votre journée.

Que vous soyez prêt à vous lâcher après une dure journée ou que vous ayez simplement besoin d'une petite sieste pour vous ressourcer, Vibio s'assure que vous vous réveillez à l'heure. Réglez l'alarme dans l'application conviviale, disponible à la fois pour iOS et Android, et placez Vibio sous votre oreiller ou votre matelas. Lorsqu'il est temps de commencer votre journée, Vibio vous réveille avec des vibrations silencieuses mais puissantes. Vibio est le choix idéal pour les gros dormeurs, les couples et les personnes malentendantes.

Vibio peut même vous notifier en cas d'appel et de message pendant la sieste, pour que vous ne manquiez rien d'important. Vous n'êtes pas encore prêt à sortir du lit ? Tirez la sangle de repos sous l'oreiller pour rester au lit pendant quelques minutes supplémentaires.



MD

Dispositif médical
marqué CE
conformément au
règlement européen
MDR 2017/745

Spécifications techniques



Dimensions et poids

Vibreuse de lit

Ø: 94 × 94 mm, 3,7 × 3,7 po

Hauteur : 27 mm, 1,1 po


Poids : 153 g, 5,4 po.

Sangle de sieste

Length: 120 mm, 4,7 po



Boutons et indicateurs

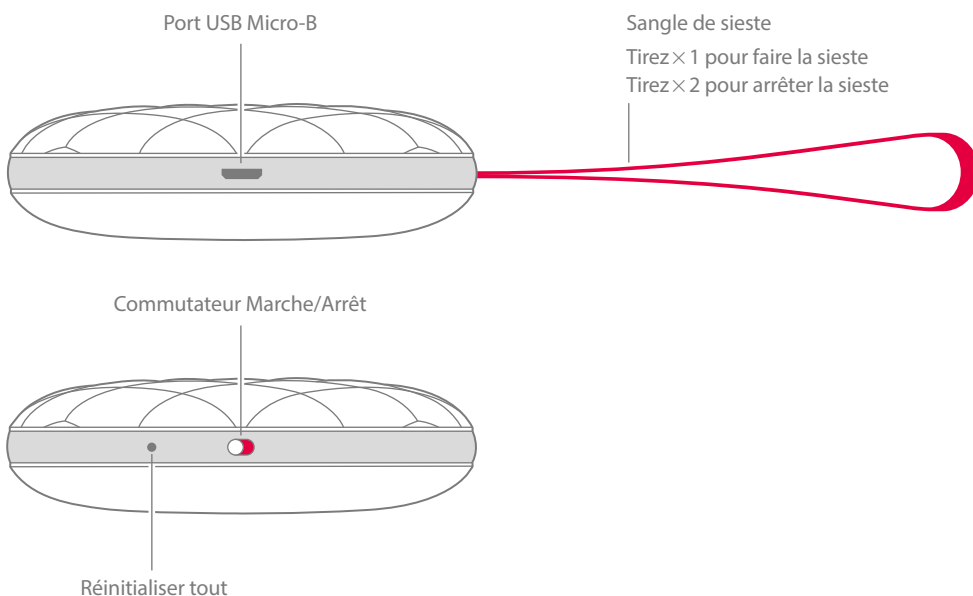

Compatibilité

- iOS 15 / Android 8 et versions ultérieures
- iPhone 6S et versions ultérieures
- Téléphones Android modernes

Fréquence et portée

- Fréquence Bluetooth® 2400 – 2483,5 MHz
- Couverture Bluetooth® : Jusqu'à 30 m, 33 yd, champ libre.

Exigences environnementales

- Pour usage intérieur uniquement
- Température : 0 to 35° C
- Humidité relative : 15 % – 90 % (sans condensation)

Homologations

MD Ce produit est un dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 (règlement relatif aux dispositifs médicaux).

Alimentation et pile

- Alimentation par batterie : 1x3,7V AA Lithium-ion
- Consommation d'énergie : Actif avec de fortes vibrations : < 1000 mA au repos : < 100 µA
- Durée de fonctionnement : Jusqu'à 60 jours par charge
- Temps de charge : Jusqu'à 1,5 heure @ 500 mA
- Courant de charge : Jusqu'à 500 mA, 5 V CC

Entretien et nettoyage

- Sans entretien Nettoyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyants pour vitres ou pour produits ménagers ou d'abrasifs.

Câbles et connexions

- Longueur du câble : 1 m, 39 po
- Contacts : USB type A vers USB Micro-B

Connectivity

- Bluetooth® 5

Contenu du boîtier

- BE1221-P02 Coussin Vibrant Vibio
- Câble de chargement USB
- Guide de démarrage (Smartphone non inclus)



© 2025 et ™ Bellman & Symfon AB. Tous droits réservés.

Bellman, Bellman & Symfon et le logo Bellman & Symfon sont des marques déposées de Bellman & Symfon AB. Cette brochure est susceptible d'être modifiée sans préavis.

BE1221-P02_033DSH1.0-FR

bellman.com