


Visit Trykknappsender

BE1420-868



 Bellman & Symfon®

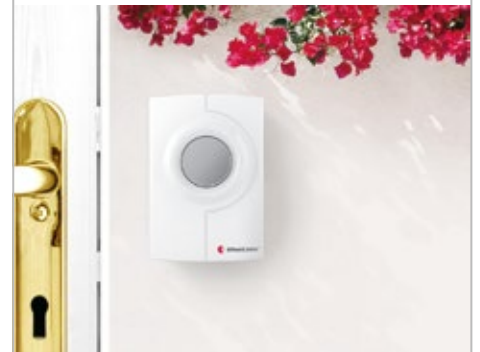

Egenskaper

Lett å bruke

Ha den rundt halsen hele dagen

Lett og slitesterk

Tåler daglig bruk

Pålitelig radiokobling

Opp til 250 meters rekkevidde

Lang batterilevetid

Holder opp til to år

MD

CE-merket medisinsk enhet i
henhold til EU MDR 2017/745

Styr ditt hjem med fingertuppene.

Trykknappsenderen fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Den kan bæres rundt halsen og brukes som en samtale-knapp eller installeres ved ytterdøren som en trådløs dørklokke.

Lett og slitesterk

Trykknappsenderen er laget til daglig bruk. Den er stort sett vedlikeholdsfri og holder i flere år på kun ett batteri.

Kan også brukes som personalarm

Når du har trykknappsenderen rundt halsen, kan du tilkalle personen som har mottakeren dersom det oppstår en situasjon som krever din oppmerksomhet.

Når man trykker på knappen for å tilkalle hjelp, sendes et signal umiddelbart til Visitmottakeren som gir fra seg et lydsignal, blinker eller vibrerer, avhengig av hvilken type mottaker du har.

Bruk den som dørklokke

Trykknappsenderen kan også brukes som en trådløs dørklokke. Monter den ved ytterdøren, som en vanlig dørklokke, slik at du kan velkomme din familie å venner hjem.

Når besøkene trykker på knappen, sendes et signal til din mottaker: lyd, lys eller vibrasjoner varsler deg om at dine gjester står ved døren.


Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde: **66 mm**
Bredde: **48 mm**
Dybde: **23 mm**
Vekt: **50 g inkl. batterier**



Produktøversikt

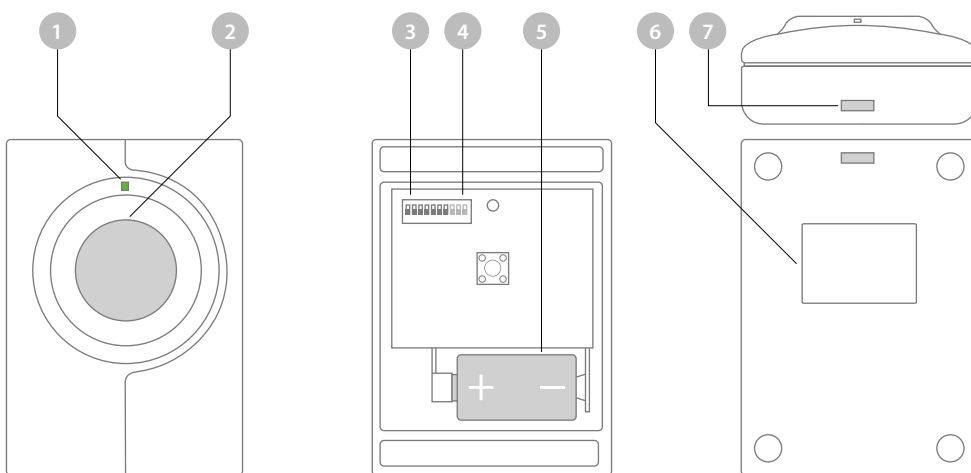

Strøm og batteri

- Batteritype
6V PX28A alkalisk eller 6V PX28L litium
- Strømforbruk
Aktiv 35 mA, dvalemodus 0.05 μ A
- Driftstid
~ 2 år

Antall radionøkklér

- 64. Kan økes til 256 med spesiell programvare.

Bruk / omgivelser

- For inn- og utendørsbruk men beskyttet. Produktet er ikke vanntett.
- Driftstemperatur: -10° til 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90%, ikke kondenserende

Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Knapper og kontroller

- 1 Lysdiode for status
- 2 Trykknapp
- 3 Signalbryter
- 4 Radionøkkelbryter
- 5 Batteriluke
- 6 Uttak for halsreim
- 7 Teip for veggmontering

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke bruk vaskemidler, spraye, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler.
- Ikke til gjenbruk.

Frekvens och rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

I esken

- BE1420-868 Visit Trykknappsender
- PX28A 6V alkalisk batteri
- Halsreim med sikkerhetslås
- Skruer og plugg
- Dobbelsidig teip
- Bruksanvisning



© 2025 og TM Bellman & Symfon

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1420-868_001DSH1.0-NO

bellman.com