

Visit Blitsmottaker

BE1441-868/BE1442-868



Egenskaper

Høyintensivt blitslys
30 Candela Xenon-blitser

Ulike farger på lysdiodene
Lett å skille mellom signalene

Roterbar topp
Lett å rette blitslyset til en bestemt retning

Multiple tilkoblinger
Tilkoble telefon og sengevibrator

Batterireserve (BE1442-868)
Tar over ved strømbrudd

MD

CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745

Se hva du ikke hører.

Blitsmottakeren fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Med klare blitser forteller den når døren eller telefonen ringer, når din baby behøver oppmerksomhet eller om en brann skulle inntreffe.

Kraftig og bærbar


Blitsmottakeren er meget lett å bruke. Koble den i strømuttaket og plassér den på en hylle eller et bord. Du kan også henge den opp med tilbehøret for veggmontering.

Blitsmottakeren gir et høyintensivt blitslys som synes t.o.m. i godt belyst rom og bruker ulike fragerde lysdioder for å skille mellom signalene. Det er enkelt å rette blitsen i en bestemt retning med hjelp av den roterende toppen.

Blitsmottakeren har separate tilkoblinger for fast- og mobiltelefon. Dessutom kan du tilkoble en sengevibrator og våkne opp til vibrasjoner om noe skulle skje mens du sover. BE1442-868 er også utstyrt med batterireserve som tar over ved strømbrudd.



Teknisk informasjon


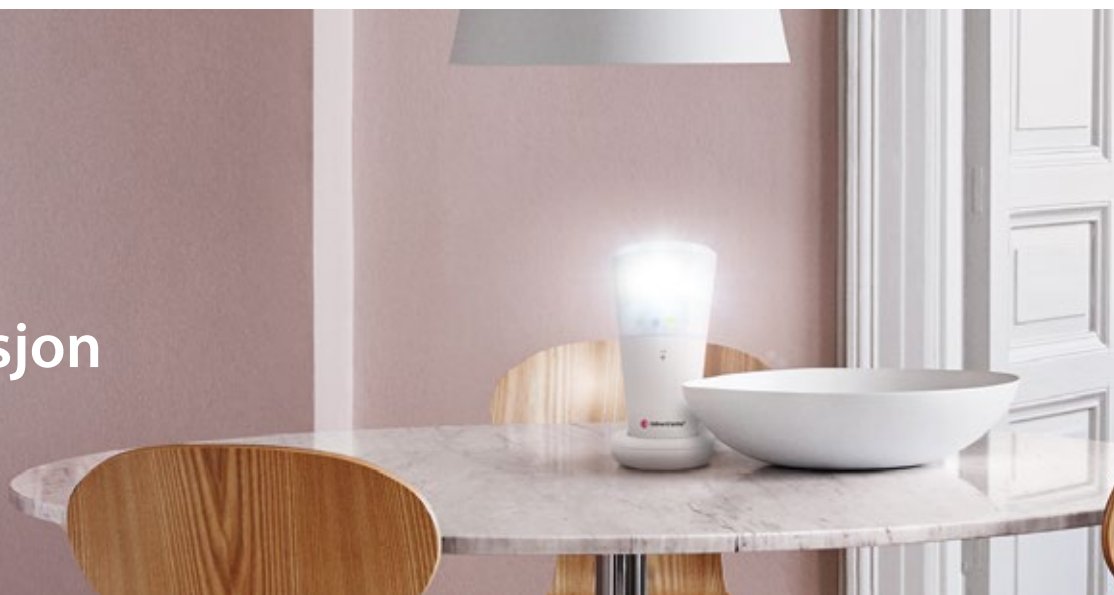


Mål og vekt

Høyde	BE1441: 140 mm BE1442: 155 mm
Diameter	BE1441: 70 mm BE1442: 78 mm
Vekt	308 g



Knapper og kontroller

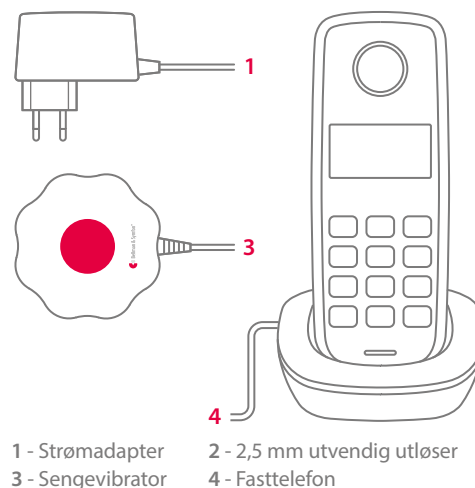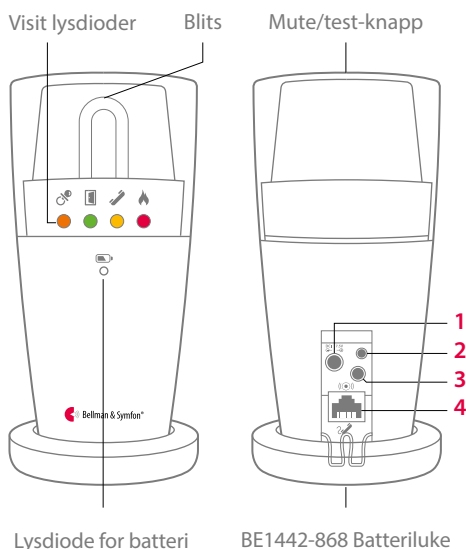

Egenskaper

- Modeller
BE1441-868 och BE1442-868 med batterireserve
- Signal
Innebygd ~30 Candela Xenon-blits
Advarse! Blitslys kan forårsake epileptisk anfall.
- Aktivering
 - Via Visitsender
 - Via fast telefon (analog telenett)

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: 50 – 250 m, avhengig av bygningens egenskaper

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Strøm og batteri

- Strømforsyning
7.5 V DC / 1500 mA med nettaggregat
- Strømforbruk
Aktiv: 750 mA, standby: 8 mA
- Batterier (kun BE1442-868):
4 x 1.2 V AAA (LR03) NiMH oppladbare
Driftstid: ~48 h ved fullt ladet batteri

I esken

- BBE1441-868 Visit Blitsmottaker eller BE1442-868 Visit Blitsmottaker med batteribackup
- 7,5 V DC / 1500 mA strømadapter
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterier (kun modell BE1442-868)

Omgivelser

- For innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet:
15% til 90%, ikke kondenserende

Visit lysdioder

Lysdiodene viser følgende:

- Oransje lysdiode med et smokksymbol
Visit Babymonitor er blitt aktivert
- Grønn lysdiode med et dørsymbol
Visit Dørsender er blitt aktivert
- Gul lysdiode med et telefonsymbol
Visit Telefonsender er blitt aktivert
- Rød lysdiode med et flammesymbol
Visit Brannvarsleren er blitt aktivert
- Oransje og rød LED-lys blinker vekselvis.
CO-alarmen er aktivert.

Tilbehør

- BE9075 Veggfeste
- BE1270-P02 Sengevibrator
- BE9105 Telefonledning

© 2025 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1441-868-1442-868_186DSH1.0-NO

bellman.com