

Visit Telefonsender

BE1431-868



Hold kontakt med dine nære og kjære

Visit telefonsender er en del av Visitsystemet som hjelper mennesker med nedsatt hørsel å oppfatte signaler hjemme. Den kan brukes for å detektere både fast- og mobiltelefon og til og med vise når du får en melding på din tablet (tilbehør kreves).

Slik fungerer den

Når telefonen ringer sender telefonsenderen et signal til din Visitmottaker som viser med lyd, blitslys eller vibrasjoner at noen prøver å ringe deg.

Visit telefonsender er utstyrt med to ekstra innganger for tilkobling av:

- Matte eller magnetbryter
- Eksisterende dørklokke etc.

Du kan dessuten velge å ha forskjellige signalmønstre for hvert tilbehør så det blir lett å skille mellom dem.

Visit telefonsender er meget lett å installere, praktisk talt vedlikeholdsfri og har en batterilevetid på opp til ti år.



Egenskaper

Detekterer de fleste telefoner

Multiple tilkoblinger
Tre separate triggerinnganger

Valgbart signal
Ulike signaler for ulikt tilbehør

Lang batterilevetid
Opp til 10 års batterilevetid

Sikker radiotilkobling
Opp til 250 m rekkevidde

MD

CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745


Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde:	100 mm
Bredde:	65 mm
Dybde:	27 mm
Vekt:	134 g inkl. batterier



Knapper og tilkoblinger

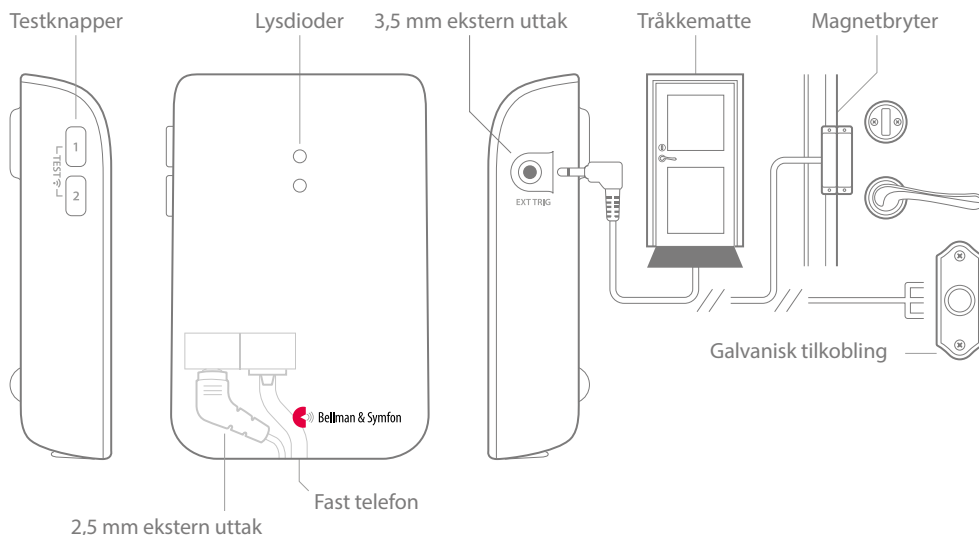

Tilkoblinger

- Modular RJ11 kontakt for analog telenett
- 3,5 mm ekstern inngang for annet tilbehør

Aktivering

- Testknapper
- Tråkkematte eller magnetbryter
- Eksisterende dørl klokke kobles til ekstern uttak

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og radiosendere som TV og mobiltelefon.

Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Strøm og batteri

- Strømforsyning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkalisk
- Strømforbruk
Aktiv < 70 mA, Standby < 15 µA
- Driftstid
Alkalisk batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

Antall radionøkler

- 64. Kan økes til 256 med egen programvare.

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke bruk rengjøringsmidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.
- Ikke for gjenvinning

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % til 90 % (ikke kondenserende)

I esken

- BE1431-868 Visit telefonsender
- BE9105 Telefonledning
- 2 x 1.5V AA alkaliske batterier
- Borrelås for veggmontering
- Skruer og plugg
- Bruksanvisning



Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE9026-P02 Tråkkematte
- BE9023-P02 Magnetbryter
- BE9253 Ekstern kabel (3,5 mm kontakt)

© og TM 2025, Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Produktdesignet er patentert. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1431-868_001DSH1.0_NO

bellman.com